

心酷 贴心守护心电图



yourecg

产品使用说明书

Instruction For Use Of Products

目录

02/前言

03/心电图概述

- └ 03/用途
- └ 03/功能
- └ 03/开箱
- └ 04/组成
- └ 04/装配
- └ 05/连接
- └ 05/测量
- └ 06/测量结果
- └ 06/性能指标
- └ 07/电气特性
- └ 07/使用环境

08/APP说明

10/注意事项

10/联系我们

本说明书为心酷贴心守护心电毯（以下简称心电毯）的功能和操作说明。用户在使用前请仔细阅读此说明书，以确保能够正确地使用心电毯。

本说明书可能因软件或技术规格的变更而升级，如有更新恕不另行通知。

注意：心电毯需与带有OTG功能的终端（手机或平板）连接，并在该终端上安装APP才能使用。



心电图概述

01 用途

心电图可以监测人体心电图的心率和心律的异常动态变化，对使用者进行异常情况提示。

02 功能


通过传感器采集人体心电信号，经USB，连接手机或平板等进行记录，可察看心率趋势图、心率分布图、节律趋势图和异常节律分布图等。

03 开箱

打开包装袋，取出心电图，检查心电图组成是否完整，如有损坏，请即与销售商联系。

04 组成

心电毯主要由传感器、金属扣、拆洗连接器、心电模块、USB接口和毯子等组成，详见图。

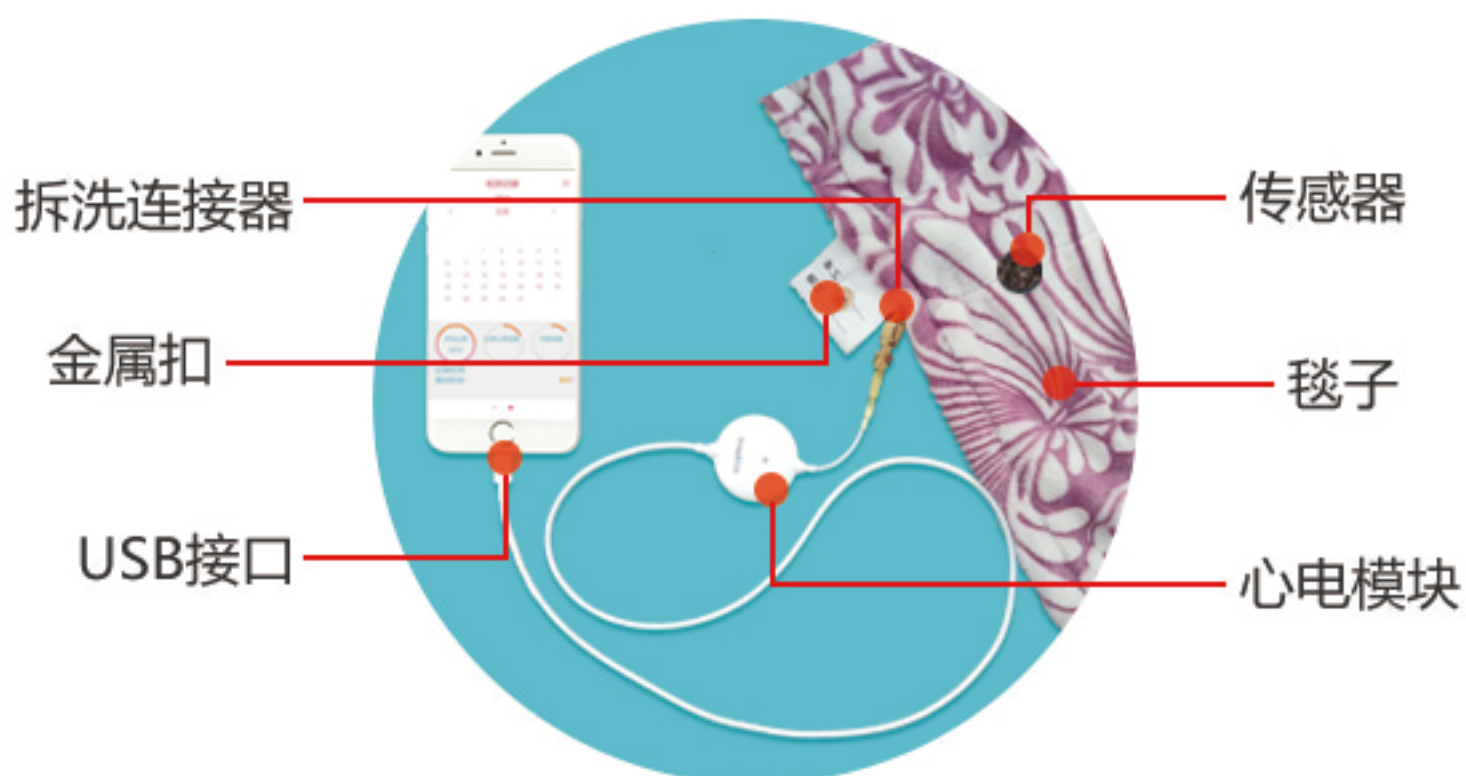

05 装配

将金属扣与心电模块扣上，并确保拆洗连接器部分已经连接。

心电毯概述

06 连接采集器

将USB接口连接终端（手机或平板）。

07 测量

使用者平躺在心电毯上，保证皮肤与两个心电传感器接触，心电毯将自动开始工作。

运行APP，注册后登录，按需设置并使用APP监测。



08 测量结果

监测结果将在APP上显示，包括心电图、平均心率、节律状态、睡眠时长、深睡时长、潜睡时长、睡眠质量。如果监测到异常，系统将发出警告。

APP会自动保存每次监测记录，用户可随时查看。

09 性能指标

灵敏度：	5mm/mV(X0.5) 10mm/mV(X1) 20mm/mV(X2)
扫描速度：	12.5mm/s 25mm/s 50mm/s
测量范围：	15-350bpm
精度：	±1%

心电毯概述

10 电气特性

电压：	5V DC
功率：	0.15VA

11 使用环境

温度：	5℃ ~ 40℃
相对湿度：	25% ~ 95%

01 App下载



方法1：使用二维码下载

方法2：通过网页下载

<https://www.yourecg.com>

02 注册和登录




03 连接



(USB连接即插即用)

App说明

04 检测

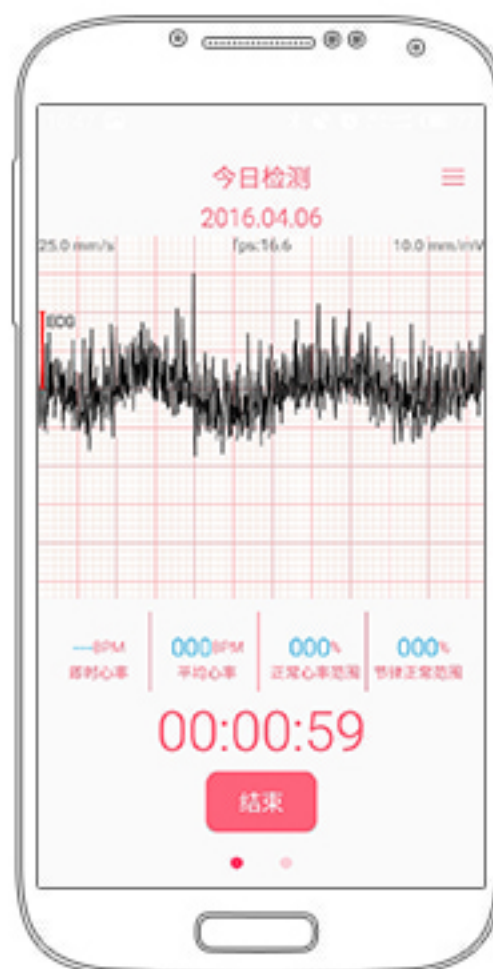

05 检测报告



注意事项和联系我们

01 注意事项

请参照说明书或APP的说明，正确使用心电图毯。使用过程中，请保持传感器和皮肤清洁，远离干扰源，如电脑、微波炉和路由器等。遇到雷雨天气时，禁止使用。

若出现严重干扰，请检查连接和测量环境等因素，确保符合上述条件，再次检测。

请仔细阅读app的健康报告，合理采纳健康提示。

需要清洗时，请拆掉心电模块，放入洗衣网清洗。

02 联系我们

如您在使用过程中遇到问题，或是有任何意见和建议，请随时向我们反馈。

ADD：重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEL：020 - 25668562 FAX：020-56955521-1



为您的健康保驾护航!

重庆汉邦网络技术有限公司

©2015 Han Bang Inc All Rights Reserved